

NEW

Empowered by Innovation

NEC

非接觸式人體體溫測量鏡 Thermo Mirror



■ 不需接觸，安全衛生

人一靠近就會感應而有反應。
就算只有臉靠近，不需接觸也可測量皮膚溫度。使用非接觸式進行溫度測量，
以避免二次感染發生。

■ 時尚感設計

適合設置在飯店的櫃檯和公司的接待處，
為高品質的設計。
待機過程中，將會顯示內部的溫濕度、時
鐘、及日期。

■ 自動設定判定高溫者的溫度


皮膚的溫度，受到環境溫度很大的影響。本產品搭載的「警報溫度自動計算機能」，可自動依據環境溫度來計算以設定發燒溫度的判定標準。

■ 優良的機能擴充性

當檢測出高溫者時，管理系統將啟動警報表示燈。因能夠簡單地擴充機能，
能廣泛活用於各種場景。

產品圖片

Product

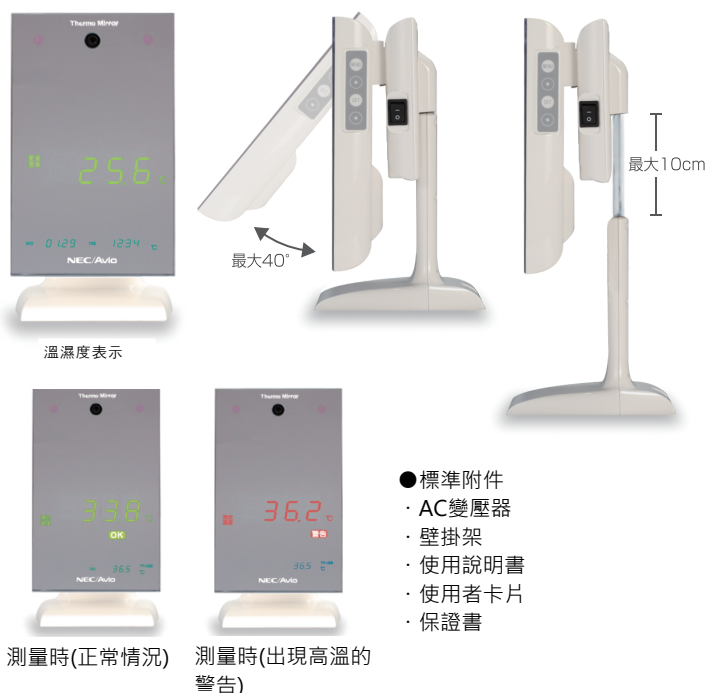

產品規格


Spec

機型	SX-01A 經濟型	SX-01B 標準型
皮膚溫度計	溫度測量範圍	28°C~42°C
	溫度測量精確度	36°C±0.5°C(周圍溫度25°C)
	測量距離	約30cm
	測量模式	單人模式(一次測量一人)/連續模式(連續測量)
	警報判定機能	○
	警報溫度自動計算功能	○
	警報鈴聲	○
	警報輸出信號	X
	介面	X(無端子台)
溫濕度計	溫度精確度	±1.7°C(環境溫度10°C~40°C)
	濕度精確度	±5%RH(20°C~80°C, 25°C時)
AC變壓器	輸入: AC100V 50/60Hz; 輸出DC9V	
消費電力	3W	
尺寸	W 125mm×H200mm×D66mm	
重量	約1.2kg	
使用溫度	10°C~40°C	
保存溫度	-10°C~60°C	
架設方法	桌上、壁掛、三腳架	

測量距離

Measurement


在鏡子前移動臉部就可以簡單安全的測量體溫。
 當人體靠近鏡子60公分以內，將會觸發感應器並且啟動測量模式。
 在測量模式下要測量皮膚溫度，則需靠近本體約30公分。

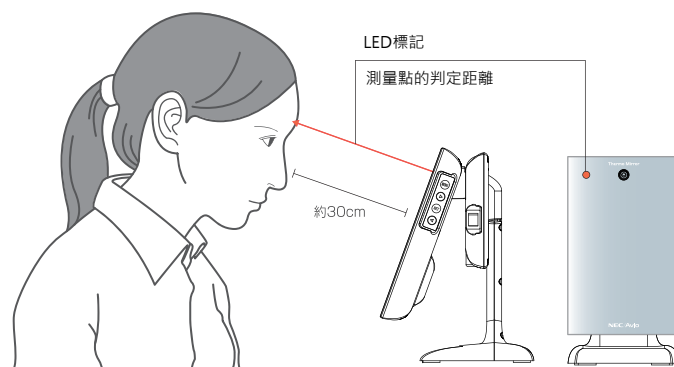

擴充性

Scalability


SX-01B可以連結警報器和門禁管理系統，具有良好的擴充性，藉由信號連接擴張機能，運用在不同的情境下。

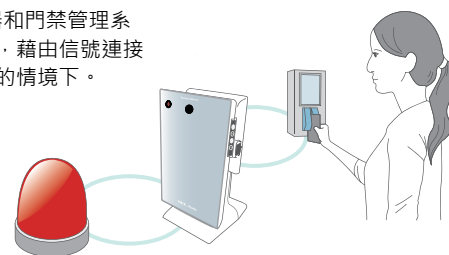

測量情境

Scene

可使用附屬的壁掛架掛在牆上，放在房間入口或浴室等等。
 另外若放在三腳架上，便可以根據情況調整高度。

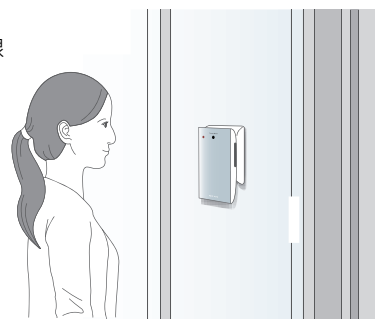

體溫和皮膚溫度並不相同，詳情請參閱說明書，請將本產品放置在水平且沒有震動的場所。

⚠ 本產品使用上注意事項

●火災、地震、第三者造成的事故、顧客人為損壞、濫用等異常條件之下發生之損害，不在本公司負責的範圍之內●因本產品故障所導致任何(資料消失、商業利益損害)的損失，本公司亦不負賠償責任●使用其他的聯結機器、其他公司軟體等所造成之損壞，本公司不負相關賠償責任●本型錄所標示之公司名稱、商品名稱為正式登錄之商標●型錄上記載之設計、規格、價格會因為更新而有所變動●因為印刷的緣故，實際的商品會和照片有些差異●若需要支援產品導入所需的裝設、操作指導，其費用另計●此型錄畫面經過合成處理

●本型錄中的公司名、產品名為各公司的登錄商標
 ●根據國外交易或貿易法規定，本製品(含軟體)若為規定貨物，如果需要攜出日本國外、請取得日本政府輸出許可申請書等必要手續。
 ●本型錄上刊登的產品顏色，因印刷緣故，和實物多少有些不同。另外，因產品改良造成樣式、形狀的變更，恕不另外通知。



安全注意事項

使用本產品時請詳讀說明書內『警告、注意事項』，依正確的方式操作。遠離高溫、多濕、水、灰塵、腐蝕性氣體的地方。

聯絡方法

台灣恩益禧股份有限公司
 台北市南京東路二段167號7F
 TEL : (02) 2515-0000